



1. Verwendungszweck

Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Stuhlprobe zur anschließenden *in-vitro*-diagnostischen Untersuchung der Darmflora bei der MVZ GANZIMMUN GmbH.

Anwendungsbereich: für Erwachsene - **für Kinder & Jugendliche unzugänglich aufbewahren!**

2. Inhalt

Prüfen Sie zuerst das Testset auf Vollständigkeit und Beschädigung sowie das Probenröhrchen auf Haltbarkeitsdauer. **Lesen Sie diese Anleitung vor der Probennahme sorgfältig durch.**

Mit dem Testset ist Ihnen von der Praxis ein Probenbegleitschein (Anforderungsbogen) und ggf. ein Barcode-Etikett ausgehändigt worden.

Sollten Komponenten fehlen bzw. beschädigt sein oder das Haltbarkeitsdatum des Probenröhrchens abgelaufen sein, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen.

Tel.: +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 - 19 Uhr)
E-Mail: bestellung@ganzimmun.de

Komponenten

1 Stuhlauffanghilfe		  Med Auxil analysis aids e.K. Triftstraße 25 D-38723 Seesen
1 Stuhlprobenröhrchen gefüllt mit Flüssigkeit		  Immundiagnostik AG Stubenwald-Allee 8a 64625 Bensheim
1 Schutzgefäß		1 Etikett mit Datum, Uhrzeit, Name Datum: Uhrzeit: Name:
1 Versandtasche		

3. Wichtige Hinweise

Bitte treffen Sie folgende Vorbereitungen zur Gewinnung der Stuhlprobe:

- Entfernen Sie evtl. vorhandene WC-Duftspüler und spülen Sie nach.
- Wichtiger Hinweis für Frauen:**
Bitte gewinnen Sie keine Stuhlprobe während Ihrer Periode.


Die Probe bringen Sie möglichst zeitnah – am besten am Tag der Probennahme – zur Post. Bis zum Versand soll diese im Kühlschrank gelagert werden. **Kein Versand vor dem Wochenende oder einem Feiertag!**

4. Testdurchführung

- Die Stuhlauffanghilfe platzieren Sie – gemäß Anleitung auf dem Produkt – in Ihrer Toilette.
Achtung: Stuhlauffanghilfe und Stuhlprobe dürfen nicht in Kontakt mit Toilettenwasser und Reinigungsmitteln kommen. Die Stuhlprobe sollte zudem nicht mit Urin vermengt werden. (Abb. 1)
- Halten Sie das Probenröhrchen am blauen Konuseinsatz fest. (Dieser bleibt verschlossen auf dem Stuhlprobenröhrchen.) Dann drehen Sie den gelben Dosierstab auf und ziehen diesen heraus. **Achtung:** Die Flüssigkeit NICHT aus dem Probenröhrchen schütten! (Abb. 2)
- Stechen Sie mit dem Dosierstab an 3 verschiedenen Stellen der Stuhlprobe ein. Beachten Sie, dass die Proben vom Anfang, Mitte und Ende des Stuhlgangs stammen sollen. **Alle** Rillen der Dosierspitze müssen mit Stuhl gefüllt sein. (Abb. 3)
- Stecken Sie den Dosierstab zurück in das Stuhlprobenröhrchen. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. (Abb. 4)

Achtung: Es darf nur diese kleine, definierte Menge an Stuhl in das Stuhlprobenröhrchen gelangen. Eine zu große Menge an Stuhl kann dazu führen, dass Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann bzw. Sie ein falsch positives Messergebnis erhalten.

- Verschließen Sie danach das Stuhlröhrchen gut. (Abb. 5)
- Kleben Sie das Barcode-Etikett, das Ihnen ggf. in der Praxis ausgehändigt wurde, auf das Röhrchen. Falls Ihnen ggf. kein Barcode-Etikett ausgehändigt wurde, füllen Sie bitte das beiliegende Etikett mit Datum, Uhrzeit, Name aus und kleben dieses auf das Probenröhrchen. (Abb. 6)
- Stecken Sie das Stuhlprobenröhrchen in das Schutzgefäß mit der Saugelinge und bewahren es bis zum Versand im Kühlschrank auf. **Nicht einfrieren!** (Abb. 7)

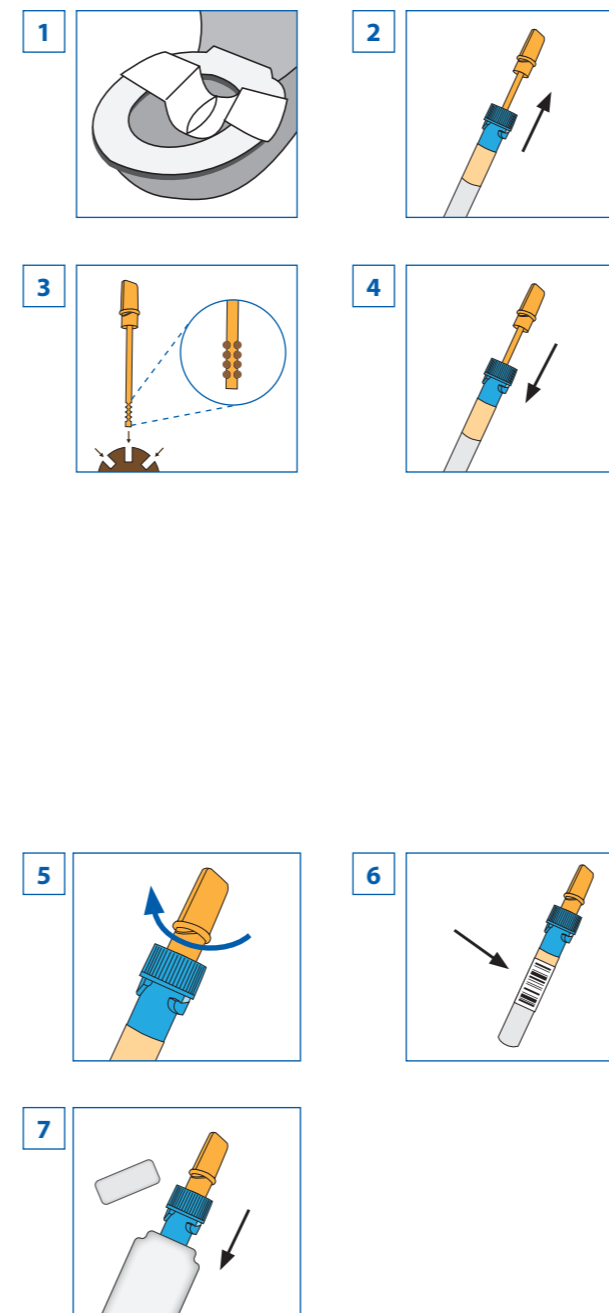

Versandtasche

- Zum Versand legen Sie das Schutzgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein (Patientenname, -adresse, Geburtsdatum, Abnahmedatum) in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken. **Achtung:** Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.
- Der Versand sollte von **Montag bis Donnerstag** und **nicht vor Feiertagen** erfolgen.



5. Entsorgung


- Die Stuhlauffanghilfe (mit dem restlichen Stuhl) entsorgen Sie über die Toilette.
- Alle weiteren Materialien und Verpackungen können im Hausmüll entsorgt werden.
- Waschen Sie sich nach der Probennahme gründlich die Hände.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die MVZ GANZIMMUN GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung überprüft und validiert wurden.


Symbole und Kennzeichen:


 „Conformité Européenne“: Konformität dieses Produktes entspricht allen geltenden EU-Vorschriften.

 Hersteller


 Verwendbar bis


 Artikelnummer

 Chargennummer

 Gebrauchsanweisung beachten

 *In-vitro*-Diagnostikum

 Nicht wiederverwenden

 2°C – 30°C Temperaturgrenzwerte